

# AVS-75 型排毒器

## 日本語取扱説明書

著作権は ANH ニューレディー 所有する



使用する前に必ずこの取扱説明書を読んで下さい

本器機は病気治療の目的ではなく、健康維持の目的で使って下さい

### 目次

安全上の注意事項.....	2
使用上の注意事項.....	2
仕様.....	3
操作パネル.....	3
本体と付属品.....	3
使用方法.....	3
毒素の場所判断.....	4
使用できない人.....	5
注意事項.....	5
故障と思われる時.....	5
コース設計.....	5
修理と保守.....	5

## 安全上の注意事項



**警告** この表示欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意** この表示欄は、「傷害を負う可能性または物の損害のみが発生する可能性が想定される」内容です

### 警告

1. コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしないでください。
2. 絶対に改造、分解、修理をしない。修理はメーカー、販売店にご相談ください。
3. 本体を拭く時、電源を外して、乾燥した雑巾で拭いてください。
4. 湿度高いところ、燃える気体、物があるところに置かない。水につけない、水をかけたりしないでください。
5. 子供など取扱不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わないでください。

### 注意

1. 長い時間に使わない時、電源プラグが電源から外してください。
2. 脈調整装置使用者、金属、電子医療機器、電磁装置を体内に入っている人が使用禁止です。
3. てんかん病患者、重い心臓病患者、臓器、器官移植された人が使用禁止です。
4. クエン酸で洗浄する時、子供の手が届かない所でやってください。
5. 本機を移動する時、震度をかけないでください。
6. 湿度高いところ、煙多いところ、腐食性がある物の隣、太陽光が直接当たるところに置かないでください。
7. 本体の上に、花瓶、コップ等を置かないでください。
8. 本体と電極は乾燥状態に保ってください。電極が使用後黄色いになったり、粉末がでっつりの現象があります、使用上問題がありません。
9. 使用時以外、必ず電源プラグを切ってください。

### 使用上の注意事項

1. 電極は消耗品です。50回ぐらい使えます。50回使用後、新しい電極を購入して、交換してください。
2. 温水を使って、水の深さは12 - 20cmぐらいは最適です。電極はなるべく水の深いところに入れてください。
3. 毎回使用後、電極がクエン酸で洗浄して（目安：15g - 18gぐらいのクエン酸粉末を500mlから700mlの温水（60度）に入れて、5分間置いてから、清水で流してください）、ドライヤ等で乾燥させて、乾燥なところに置いてください。（クエン酸は、ポットの洗浄剤として、市販しています。）
4. 足湯の容器は陶器、プラスチックの容器を使ってください。金属容器は不可です。
5. 連続のご使用で、本体が熱くなったら、一旦電源を切って、冷めてから、ご使用ください。過熱による故障は保証外です。

### 仕様

名称：排毒器

型番：AVS-75


電源：110-240V(±10%) 50/60Hz

電極の使用寿命：50回(使用時間、排毒状況によって、多少変化があります)

外形：390×340×180mm

### 操作パネル：

- |               |                     |           |              |
|---------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1. Power 本体電源 | 2. 手リング差込口          | 3. 電極差込口; | 4. 電源ケーブル差込口 |
| On/off: 表示    | V. 工作電圧             | A. 工作電流   | mode. モート選択  |
| Time. 時間表示    | Start/stop. 開始/一時停止 |           |              |

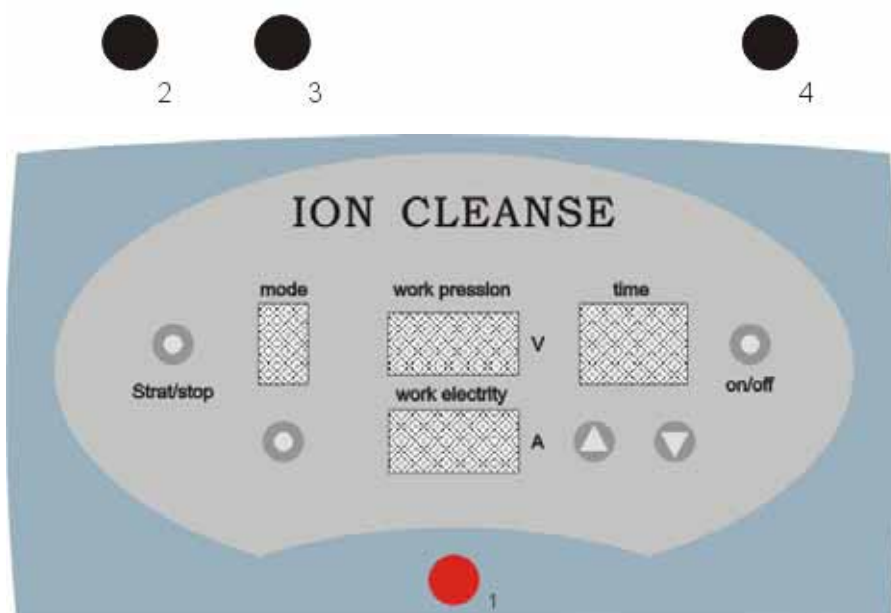

### 本体と付属品：

- 1) 本体：1台



- 2) 電極：1個 (色は黒の場合もあります。)

- 3) 電源ケーブル：1本

- 4) 手リング：1本




### 使用方法：

- 1、 本体を出して、適切な位置に置く。
- 2、 電源ケーブルを接続する。
- 3、 電極、手リングを本体に接続する。(注意：手リングが手首の皮膚と密接するようにしてください。皮膚があまり乾燥すると、よくないので、市販のクリームをぬいて、手リングを付けてください。)



4、電極を水入りのバケツに入れます。ON キーを押して、電源をいれます。バケツは金属以外の市販品を使ってください。本器機に付属していません。(注意、普通家庭用の場合は、筋肉テストは入りませんので、C の 70% (+) 30% (-) モードを使ってください。)

3、Mode の選択：

Mode キー  を押して、Mode を選択してください。通常 3 にしてください。

Mode タイプ：

1. 全正極：実験 Mode。医学臨床実験用。(医学研究者以外の方が絶対使わないで下さい。)
2. 全負極：実験 Mode。医学臨床実験用。(医学研究者以外の方が絶対使わないで下さい。)
3. 70% (+) 30% (-)：家庭用 Mode。一般に使う Mode です。
4. 15(+)-10(-)-5(+): 医療用 Mode。筋肉テストをしてから、最初に (+) が出た時、使ってください。(お医者さん以外の方が絶対使わないでください。)
5. 10(-)-15(+)-5(-): 医療用 Mode。筋肉テストをしてから、最初に (-) が出た時、使ってください。(お医者さん以外の方が絶対使わないでください。)

6、時間パネル下の  キー-或いは  キーを押して、時間を設定してください。通常 30 分に設定してあります、そのまま使えます。(8 歳から 16 歳の子供の場合は、15 分 ~ 20 分に設定してください。その時保護者が絶対側に居てあげて下さい。)

4、Start キーを押して、足を水入りのバケツにいれてください。

8、パネルに工作電圧、工作電流の表示があります。水の質によって、工作電圧、工作電流が変わります。最適な工作電圧は 1.2V 前後、最適な工作電流は 2.0 ~ 2.8A です。最適な工作電圧、工作電流を得るために、少し塩を入れて、その値前後になるまで、調整してください。工作電流が 2.0 以下と、過熱しやすいので、しないように、調整してください。

**毒素の場所判断**

使うと、自分の体の中に、毒を溜まり易い場所は分かって、自分の健康の全体な状況が分かります。毒素が長期的に体に溜まると、慢性病の元になります。排毒器の長期使用で、健康な習慣ができ、生活品質の向上ができます。

(統計のデータなので、確実ではありません、ご参考まで。)

水の色	毒素溜まる可能な場所
黄緑色	腎臓、膀胱、泌尿器官
オレンジ色	関節
褐色	肝臓、胆嚢
黒色	肝臓
深緑色	胆嚢、心血管
浮遊物の色	
白い泡	リンパ、婦人病
白い斑点	胃腸、酵素不全

黒い斑点	重金属の累積
赤い斑点	血栓、血管
白い油脂	全身、内臓

### 使用できない人

脈調整装置使用者。  
 金属、電子医療機器、電磁装置を体内に入っている人。  
 長期的に心臓病薬を飲んでいる人。  
 臓器、器官移植されて人。  
 てんかん病患者。  
 妊娠、哺乳している女性。  
 八歳以下の子供。  
 長期的に薬を飲んでいる人、心理治療をうけている人。

### 注意事項

低血圧、低血糖がある人は、食後にご使用して下さい。  
 なるべく血圧正常な時に使用してください。  
 排毒するのは体力使いますので、使用後、水分、果物、ビタミン等たくさん取ってください。  
 排毒器は足を入らず空転しないでください、排毒器の使用寿命を減ります。

### 故障と思われる時：

工作電流が 2.8A を超えた時、故障しやすいので、本器機が自動 OFF します。  
 工作電流、工作電圧があまり低いと、過熱しやすいので、警告音が出ます。  
 電源が ON にして、30 秒ぐらいに経って、パネルになんにも表示しない時、以下の可能性があります。

- 1) 電極を水に入れてない。
- 2) 水の導電性が足りない。(少し塩を入れて、導電性を増加してください。)
- 3) 電極を本体に接続していない。
- 4) 電極の電源ケーブルが故障した。
- 5) 本体が故障した。

### コースの設計(例)：

50 歳以下の人が二日一回に使って、連続 14 回を使って、3 週間休んで、また二日一回、連続 14 回を使ってください。長期的のご使用は週一回にしてください。

50 歳以上の方が三日に一回に使って、連続 14 回を使って、2 週間休んで、また三日一回、連続 14 回を使ってください。長期的のご使用は週一回にしてください。

(時間的に、大人が 30 分、八歳から十五歳の子供が 15 分にしてください。)

### 修理と保守：

- 1、本器機が故障した場合には、販売店、メーカーに連絡してください。メーカーに修理の依頼をしてください。絶対自分が修理しないでください。
- 2、毎回使用後、電極をクエン酸で洗浄して(目安：15g - 18g ぐらいのクエン酸粉末を 500ml から 700ml の温水(60 度)に入れて、5 分間置いてから、清水で流してください、ドライヤ等で乾燥させて、乾燥なところに置いてください。
- 3、電極は消耗品です。50 回ぐらい使えます。50 回使用後、新しい電極を購入して、交換してください。